

## Пожалуйста, обратите внимание:

- Время, необходимое для лечебного сеанса HairMax® LaserBand, составляет всего 3 минуты.
- LaserBand автоматически выключится через 12 минут.
- LaserBand содержит усовершенствованные электронные компоненты, обеспечивающие правильную работу устройства. Если по какой-либо причине у вас возникли проблемы с устройством, прежде чем отправлять его нам на ремонт, обратитесь к разделу устранения неполадок в руководстве пользователя на стр. 14.
- Для получения дополнительной помощи свяжитесь с Отделом обслуживания клиентов HairMax по номерам, указанным ниже.

### Головной офис

Lexington Intl., LLC  
777 Yamato Road, Suite 105  
Boca Raton, Florida 33431 USA (США)

### Обслуживание клиентов - Гарантийный ремонт

Lexington Intl., LLC  
1040 Holland Drive, Suite 1  
Boca Raton, Florida 33487 USA (США)

Прямой номер +1 561-417-0200

Бесплатный звонок 1-866-527-3726

Понедельник - пятница с 9 до 17  
по стандартному восточному времени

США 1-866-527-3726

Великобритания 0808-134-9868

Австралия 1-800-937-358

### Регистрация

Чтобы подтвердить вашу гарантию, зарегистрируйтесь на сайте [www.hairmax.com/warranty](http://www.hairmax.com/warranty)


Патент [www.HairMax.com/patents](http://www.HairMax.com/patents)

Сделано в Китае

© Авторское право 2016 Lexington Intl., LLC.

Все права защищены.

Лазерные устройства HairMax предназначены для лечения андрогенетической алопеции и стимулируют рост волос у мужчин, имеющих классификацию по Norwood Hamilton от IIa до V, и у женщин по Ludwig (Savin) I-4, II-1, II-2 или с выпадением волос с передней части головы, а также для типа кожи по Fitzpatrick от I до IV.

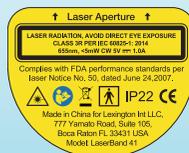

**HAIRMAX**  
The science of hair growth.



HairMax®  
**LaserBand 41**

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

HairMax® LaserBand – это очень эффективное устройство, если пользоваться им правильно. Оно изготавливается с использованием точных деталей и прослужит 10-15 лет при нормальном использовании. Пожалуйста, прочитайте руководство пользователя перед началом работы с LaserBand.

## Модель LaserBand 41



Используйте LaserBand в течение всего 3 минут 3 раза в неделю, в идеале через день (например, понедельник, среда, пятница).

### Как работает HairMax

- голова должна быть свежeweымытой (волосы могут быть мокрыми, сухими или влажными)
- используйте LaserBand до нанесения средств для укладки (они могут усиливать или блокировать лазерное излучение)
- регулярно очищайте область лазера влажной тканью. Не применяйте агрессивные моющие или чистящие средства для очистки любой части LaserBand

### Варианты зарядки

**Заряжайте LaserBand в течение 5-6 часов перед первым использованием.**


Перед началом зарядки HairMax убедитесь, что устройство выключено.

**ВАРИАНТ 1.** Вставьте шнур питания в подставку для зарядки, а другой конец подключите к электрической розетке (рис. А). Положите HairMax на подставку для зарядки.


**ВАРИАНТ 2.** Вставьте шнур питания непосредственно в зарядное гнездо в нижней правой части LaserBand, а другой конец подключите к электрической розетке (рис. В).

Во время зарядки индикатор на кнопке питания будет мигать. Если индикатор горит постоянно, LaserBand полностью заряжено (рисунк C).

### Не используйте LaserBand во время зарядки.

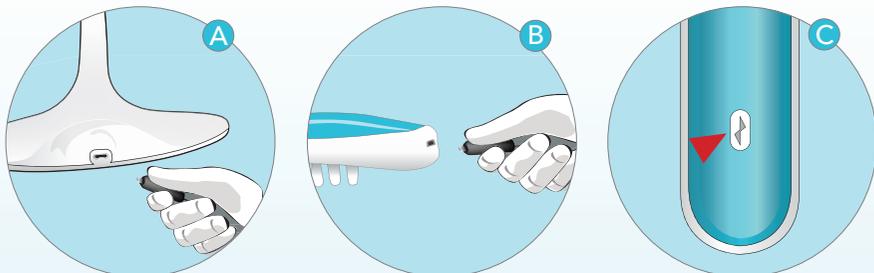

Перед началом лечения проверьте чувствительность к LaserBand (рисунок D). Для получения дополнительной информации см. Страницу 5 Руководства пользователя.

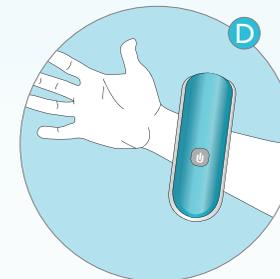


### Метод лечения

HairMax применяется на коже головы в 6 положениях. Оставляйте его в одном положении в течение как минимум 30 секунд. Каждые 30 секунд он будет вибрировать, чтобы вы знали, когда переместить его в следующее положение.

Включите HairMax, нажав кнопку питания (рисунок E). Затем поместите его по линии волос со стороны лба. Это положение 1. Когда вы почувствуете вибрацию, сдвиньте устройство назад на 2 дюйма (5 см) в положение 2. Оставьте его в положении 2, пока снова не почувствуете вибрацию.

Повторите данный процесс во всех шести положениях на коже головы. Вся процедура продолжается не менее 3 минут.

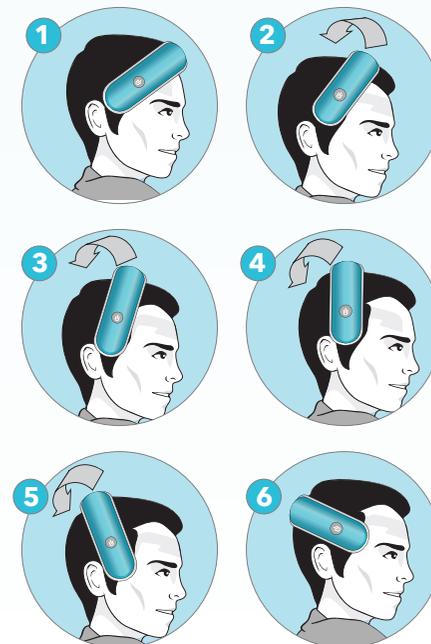

**После лечебного сеанса** выключите LaserBand, нажав и удерживая кнопку питания, пока индикатор не погаснет (рис. E). Уберите LaserBand с головы и поместите его на подставку для зарядки для последующего использования.

