

## ERGEBNISSE

Die Benutzer des HairMax werden einige oder alle der folgenden Vorteile feststellen:

- ✓ Neues Haarwachstum bei ruhenden Follikeln
- ✓ Erheblicher Rückgang des Haarausfalls
- ✓ Schnelleres Haarwachstum
- ✓ Bessere Frisierbarkeit des Haares
- ✓ Insgesamt Verbesserung der Haarqualität und des Haarzustands



# HAIRMAX®

HAIRMAX.COM

Rufen 24/7

1.800.9REGROW (734769)



LEXINGTON INTL., LLC  
777 YAMATO ROAD, SUITE 105  
BOCA RATON, FL 33431  
T. +1.561.417.0200 F. +1.561.892.0747

## FRAGEN UND ANTWORTEN

### F: Wer ist der beste Kandidat für den HairMax®?

A: HairMax kann von Männern und Frauen (Modell Lux 9 für Frauen) mit erblich bedingtem dünner werdenden Haar oder Glatzenbildung eingesetzt werden. Als System für die Beschreibung des Grades des Haarausfalls wird von den Ärzten die Norwood-Hamilton-Skala (bei Männern) und die Ludwig-Savin-Skala (bei Frauen) benutzt. Ihr Arzt kann mit Ihnen besprechen, ob der HairMax zur Behandlung Ihres Zustands geeignet ist.

### F: Wie oft muss ich den HairMax anwenden?

A: Es wird empfohlen, den HairMax 3 Mal die Woche mit jeweils einem Tag zwischen jeder Behandlung anzuwenden. Je nach Modell dauert die ganze Behandlung zwischen 8 bis 15 Minuten.

### F: Kann der HairMax bei der Einnahme von anderen Medikamenten eingesetzt werden?

A: Ja, es gibt keine Kontraindikationen für den Gebrauch des HairMax bei der Einnahme anderer Medikamente. Sie sollten dies jedoch mit Ihrem Arzt besprechen und bestimmen, welche Behandlungsmethoden für Ihre individuellen Bedürfnisse am besten geeignet sind.

### F: Werden bessere Ergebnisse erzielt, wenn der HairMax öfter als 3 Mal die Woche 15 Minuten lang benutzt wird?

A: Es wurde festgestellt, dass drei Mal die Woche die optimale Einsatzzeit ist, um beste Ergebnisse zu erzielen. Ein über 3 Mal die Woche hinausgehender Gebrauch des HairMax hat keinen zusätzlichen Behandlungsnutzen gezeigt.

### F: Wie lange dauert es, bis Ergebnisse vom Gebrauch des HairMax zu sehen sind?

A: Die Erfahrungen der Benutzer sind unterschiedlich, aber im allgemeinen sind die ersten Verbesserungen nach 12 Behandlungswochen zu erkennen. Da das Haar jedoch langsam wächst, empfehlen wir, dass der HairMax mindestens 20 Wochen lang verwendet wird, bevor die Ergebnisse beurteilt werden.

### F: Wann ist die beste Zeit für die Anwendung des HairMax?

A: Die beste Zeit für die Anwendung des HairMax ist nach dem Duschen. Er kann auf nasser oder trockener Kopfhaut angewandt werden, allerdings vor Auftragen äußerlich anzuwendender Produkte, Gels oder anderer Haarmittel.

## FRAGEN UND ANTWORTEN

Fortsetzung...

### F: Wird es bei der Anwendung von HairMax zu zusätzlichem Haarausfall kommen?

A: Einige Benutzer bemerken bei Beginn der Behandlung eine anfängliche Zunahme des Telogenausfalls. Das ist ein gutes Zeichen und deutet darauf hin, dass gesundes (terminales) Haar aus der Kopfhaut wächst und bald den Platz des vorherigen Telogenhaares einnehmen wird.

### F: Was ist der Unterschied zwischen den 3 Modellen?

A: Die von den Geräten ausgehende Laserenergie ist die gleiche. Der einzige Unterschied liegt in der erforderlichen Behandlungszeit bei jeder Sitzung. Je mehr Laser das Gerät hat, umso weniger Zeit ist erforderlich.

### F: Wie oft muss der HairMax aufgeladen werden?

A: Der HairMax ist mit einer eingebauten Lithium-Ionen-Batterie ausgestattet, und wenn er vollständig aufgeladen ist (in 2-3 Stunden), kann er ungefähr 10 Stunden ununterbrochen benutzt werden. Wenn die Batterie aufgeladen werden muss, stellt sich der HairMax ab. Es wird empfohlen, den HairMax nach jedem Gebrauch in die Aufladestation zu setzen, so dass er immer aufgeladen ist.

### F: Verringert sich die Laserkraft des HairMax, wenn die Batterie nicht vollständig aufgeladen ist?

A: Wenn die Laserkraft nachlässt, ist dies auf eine schwache Batterie zurückzuführen, und das Gerät wird sich automatisch abschalten. Es wird empfohlen, das Stromkabel mitzuführen, wenn Sie sich längere Zeit von der Aufladestation entfernt aufhalten.

### F: Wie wende ich den HairMax zur Behandlung meines Haarausfalls an?

A: Platzieren Sie den HairMax flach auf Ihrer Kopfhaut, so dass beide Zahnreihen Ihre Kopfhaut berühren. Beginnen Sie, indem Sie den HairMax entgegen der Haarwuchsrichtung von vorn nach hinten bewegen. Danach bewegen Sie den HairMax von einer Seite auf die andere. Wiederholen Sie diese Bewegungen während der gesamten für Ihr Gerät empfohlenen Behandlungsdauer.

\*Die Modelle HairMax Advanced 7, Lux 9 und Professional 12 dienen zur Behandlung von androgenetischer Alopezie und fördern den Haarwuchs bei Männern, deren Haarausfall auf der Norwood Hamilton-Skala zwischen IIa und V liegt und bei Frauen mit Haarausfall, der auf der Ludwig (Savin)-Skala bei I-4, II-1, und II-2 liegt oder bei Haarausfall im vorderen Kopfbereich. Der Hauttyp bei beiden sollte auf der Fitzpatrickskala zwischen I und IV angesiedelt sein. Laserlicht - Vermeiden Sie direkten Blickkontakt.

HAIRMAX®  
The science of hair growth.

## PATIENTEN INFORMATION

Durchbruch bei den Themen Haarwuchs, Haarpflege und Haarwissenschaft



Manche sagen, dass es das Haar ist, das den Mann oder die Frau ausmacht; das Haar wird der krönende Abschluss genannt und definiert unseren Stil und unsere persönliche Erscheinung. Haarausfall ist für viele Menschen eine frustrierende Erfahrung.

Dank dem HairMax LaserComb® gibt es nun wohl begründete Hoffnung für jene, die unter Haarausfall und dünner werdendem Haar leiden.

Lexington International, LLC begann mit der Entwicklungsarbeit der Laser-Photo-Therapie vor über 20 Jahren in Australien. Seitdem ist das Unternehmen in dieser neuen Technologie führend. 2001 wurde der HairMax in den Markt eingeführt und seitdem liegt die Zufriedenheitsrate der Benutzer bei über 92%.

2007 erhielt der HairMax nach einer klinischen Studie in verschiedenen Zentren die Freigabe der amerikanischen FDA für die Vermarktung des Produkts für die Behandlung von androgenetischer Alopezie und zur Förderung des Haarwuchses bei Männern. 2011 erhielt der HairMax nach klinischen Studien in verschiedenen Zentren die Freigabe der amerikanischen FDA für die Vermarktung des Produkts für die Behandlung von androgenetischer Alopezie und zur Förderung des Haarwuchses bei Frauen\*.

Seit 2001 wurden insgesamt sieben klinische Studien mit 460 Teilnehmern abgeschlossen, und bei allen Studien wurde die Wirkungskraft und Sicherheit des HairMax unter Beweis gestellt.

Das Handgerät HairMax ist ohne Rezept erhältlich und ist bei einer einmaligen Investition über Jahre hinweg von großem Nutzen. Es ist tragbar, einfach zu gebrauchen, und es sind nur drei Behandlungen pro Woche erforderlich. Der HairMax wird sogar von vielen Benutzern als "therapeutisch" oder "beruhigend" beschrieben.

Es sind nun 3 verschiedene Modelle erhältlich und das Produkt wird in 155 Ländern vermarktet. Der HairMax entwickelt sich rasant zum Standard für eine wirksame Haarausfallbehandlung.



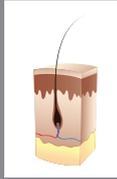
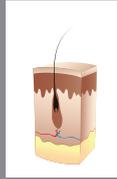
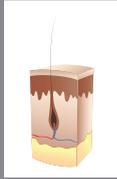
Die HairMax Zaehne scheiteln das Haar um einen ungehinderten Weg zu den Haarfollikeln zu schaffen.

Die Funktion des HairMax® basiert auf dem Prinzip der PhotoBio-Stimulation, einem Prozess, bei dem Laserenergie auf den Haarfollikel gebracht wird.

Die Laser-Photo-Therapie stimuliert Wachstumsfaktoren innerhalb des Haarfollikels. Einige Benutzer berichten von einer Stabilisierung

des Haarausfalls bei Behandlungsbeginn, gefolgt von schnellerem und dichtem Neuhaarwachstum. Dies weist darauf hin, dass der HairMax den Haarfollikel effektiv auf Zellebene angeht und in gewisser Weise sowohl den Haarwuchsprozess beschleunigt als auch gleichzeitig das Wachstum eines dickeren (Terminal-) Haares herbeiführt, wo sich vorher u.U. ein dünnes, sterbendes Haar befunden hat.

### BEHANDLUNGSZIELE

			
Energiezufuhr für gesundes Wachstum.	Wurzelstimulierung für neues Wachstum gesunden Haares.	Stimulierung des Vellusfollikels zur Anregung der Umwandlung in gesundes Haar.	Es existiert kein Follikel und in diesem Stadium kann keine Revitalisierung durchgeführt werden.

In klinischen Versuchen zeigen sich umgekehrte Miniaturisierung, Zunahme der Anzahl von Haaren pro Follikeleinheit und eine Verlängerung der anagenen Phase.

## GEBRAUCHSINDIKATION

\*Die Modelle HairMax LaserComb dienen zur Behandlung von androgenetischer Alopezie und fördern den Haarwuchs bei Männern, deren Haarausfall auf der Norwood Hamilton-Skala zwischen IIa und V liegt und bei Frauen mit Haarausfall, der auf der Ludwig (Savin)-Skala bei I-4, II-1, und II-2 liegt oder bei Haarausfall im vorderen Kopfbereich. Der Hauttyp bei beiden sollte auf der Fitzpatrickskala zwischen I und IV angesiedelt sein. Laserlicht - Vermeiden Sie direkten Blickkontakt.

Ihr Arzt wird mit Ihnen besprechen, ob der HairMax für die Behandlung Ihres Zustands geeignet ist.

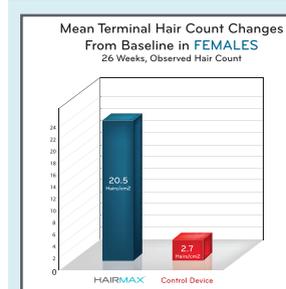


2010 wurde ein Doppelblindversuch mit Frauen der Altersgruppe 25 bis 60 Jahre mit androgenetischer Alopezie in einer Reihe von Forschungszentren im ganzen Land durchgeführt. Diese Versuche wurden unter strengen GCP (guten klinischen Richtlinien)

durchgeführt, von einem IRB (Independent Review Board [unabhängiges Forschungsgremium]) genehmigt und von einer CRO (Contract Research Organization [beauftragte Forschungsorganisation]) überwacht.

Den Teilnehmerinnen wurde willkürlich der HairMax® Lux 9 oder ein Kontrollgerät zugeordnet. Die Teilnehmerinnen

haben den HairMax 26 Wochen lang benutzt, und es wurde die Veränderung der Anzahl der Haare mit Bezug auf die Messbasislinie bewertet. Bitte sehen Sie unten die Tabelle mit den Ergebnissen.



Wie man am Ende der 26-wöchigen Studie sieht, hatten die Teilnehmerinnen, die den HairMax benutzt haben, durchschnittlich 20,5 Haare pro cm<sub>2</sub> (Quadratzentimeter) gegenüber 2,7 Haaren pro cm<sub>2</sub> beim Kontrollgerät. Diese Haaranzahl ist eine Durchschnittsangabe, manche Teilnehmerinnen, die

den HairMax eingesetzt haben, hatten über 40 Haare pro cm<sub>2</sub> mehr als aus ihrer Messbasis hervorging. Während bei den Teilnehmerinnen in der HairMax-Gruppe das Haarwachstum in der 16. Woche eintrat, war am Ende der Studie nach 26 Wochen eine drastische Zunahme des Haarwachstums zu erkennen. Es ist wichtig zu erwähnen, dass 100% der Teilnehmerinnen, die den HairMax benutzt haben, am Ende der 26 Wochen Haarwachstum verzeichnen konnten, und es wurden keine ernstesten Nebenwirkungen bekannt. Die Teilnehmerinnen berichteten ebenfalls von einer Zunahme der Haardichte und Haarfülle.

Diese Studienergebnisse machten einen entscheidenden Teil des Antrags 510(k) aus und der darauffolgenden Freigabe im Jahr 2011 für die Vermarktung für die Behandlung von Haarausfall bei Frauen.\*

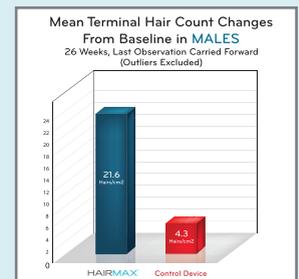


2011 wurden zwei Doppelblindversuche mit Männern im Alter von 25 bis 60 Jahren mit androgenetischer Alopezie in einer Reihe von Forschungszentren im ganzen Land durchgeführt. Diese Versuche wurden unter strengen GCP (guten klinischen Richtlinien)

durchgeführt, von einem IRB (Independent Review Board [unabhängiges Forschungsgremium]) genehmigt und von einer CRO (Contract Research Organization [beauftragte Forschungsorganisation]) überwacht.

Den Teilnehmern wurde willkürlich der HairMax Advanced 7, der HairMax Lux 9, der HairMax Professional 12 oder ein Kontrollgerät zugeordnet. Die Teilnehmer haben den HairMax 26 Wochen lang benutzt und es wurde die Veränderung der Anzahl der Haare mit Bezug auf die Messbasislinie bewertet. Bitte sehen Sie unten die Tabelle mit den Ergebnissen

Wie man am Ende der 26-wöchigen Studie sieht, hatten die Teilnehmer, die den HairMax benutzt haben, durchschnittlich 21,6 Haare pro cm<sub>2</sub> (Quadratzentimeter) gegenüber 4,3 Haaren pro cm<sub>2</sub> beim Kontrollgerät. Diese Haaranzahl ist eine Durchschnittsangabe, manche Teilnehmer, die den



den HairMax benutzt haben, hatten über 50 Haare pro cm<sub>2</sub> mehr als aus ihrer Messbasis hervorging. Es ist wichtig zu erwähnen, dass über 93 % der Teilnehmer, die den HairMax benutzt haben, am Ende der 26 Wochen Haarwachstum verzeichnen konnten, und es wurden keine ernstesten Nebenwirkungen bekannt. Die Teilnehmer berichteten ebenfalls von einer Zunahme der Haardichte und Haarfülle.

2006 wurde der FDA im Rahmen des Antrags 510(k) ein klinischer Versuch des Vergleichs eines HairMax mit einem unechten Gerät unterbreitet. In dieser Studie sollte die Förderung des Haarwachstums, Veränderung der Haardichte und Sicherheit bewertet werden. Die Studie hat gezeigt, dass der HairMax bei der Behandlung erblichen Haarausfalls bei Männern\* effektiv und sicher ist, und dies war ein ausschlaggebender Faktor bei der Erteilung der Freigabe für die Vermarktung durch die FDA im Jahre 2007.